



Documento di riferimento rapido per i controlli e le azioni di Proteus Labs

Controlli dei controller

- **Presa:** Afferra gli oggetti usando il grilletto manuale.
- **AZIONE SPECIALE:** Eseguire azioni contestuali utilizzando il trigger indice.
- **Apri il Menu dei Dispositivi Disponibili:** Apri il Menu di Sistema con una pressione del tasto Menu (controller sinistro).
- **Ricentra:** Ricentra la posizione nello spazio tenendo premuto il pulsante ClassVR (controller destro).
- **Azione alternativa:** Alterna tra spingere e tirare (es. siringa) usando i pulsanti A (destra) o X (sinistra).
- **Scorri il tablet virtuale:** usando le mani direttamente sul tablet o con la levetta destra su/giù sul controller.
- **Riposiziona il laboratorio:** puoi riposizionarlo cliccando sulla levetta destra, il che farà apparire una sfera blu davanti alla scrivania virtuale principale. Prendi la sfera blu per riposizionare il laboratorio come desideri.
- **Navigare in laboratorio:** anche se non è consigliato (può causare mal d'auto), puoi navigare in laboratorio con la levetta sinistra (piano XY) e ruotare con quella destra.

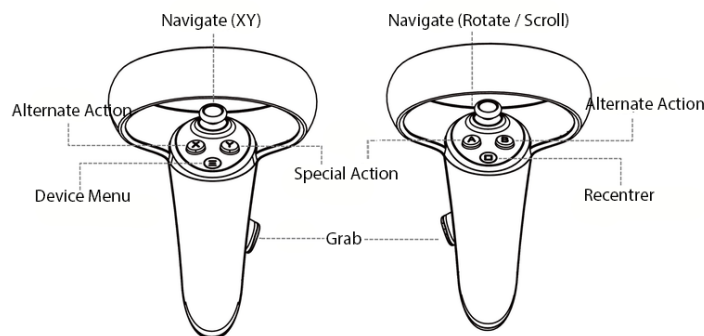


Tabella riassuntiva degli input di Proteus Labs

Impugnatura	Grilletto a mano
Azione speciale	Trigger indice
Azione alternativa	Pulsante A o X
Tavoletta a scroll	Stick del pollice destro su/giù
Naviga	Stick sinistro e destro
Muovi oggetto afferrato	
Menu del dispositivo	Pulsante Menu
Ricentramento	Pulsante ClassVR



Regolazione della posizione del banco di laboratorio e del tablet virtuale

- **Regolazione della posizione del banco di laboratorio:** Quando lanciate un laboratorio, troverete una sfera blu davanti a voi. Prendilo per sostituire il banco di laboratorio all'altezza e posizione desiderate. In qualsiasi momento, la sfera blu può riapparire cliccando sulla levetta destra. Poi prendi la sfera blu per riposizionare il laboratorio come desideri.
- **Regolazione della posizione del tablet virtuale:** Basta prendere il stick in fondo al tablet virtuale e posizionarlo nel luogo più comodo per te. **Guarda [questo video](#) per saperne di più sulle funzionalità del tablet virtuale.**

Pulsanti rotanti

- I seguenti dispositivi hanno pulsanti rotanti: piastra calda, microscopio, alimentatore e incubatrice. Per regolare il pulsante, afferralo e poi ruota il controller o la mano.



Strumenti e contenitori difficili

Spatole, pinzette e pinze per ghiaccio / accendino / biberon per lavare

Per aprire e chiudere pinzette e pinze, usa **il comando ACTION SPECIALE**.

Per accendere l'accendino o premere la bottiglia, usa **il comando AZIONE SPECIALE**.

Supporto per laboratorio e morsetti

Attacca le pinze al supporto per completare un montaggio. Puoi cliccare sulla freccia rossa in alto per ruotare le fascette vuote e ottenere la configurazione desiderata.

Siringa

Controller: Usa il comando **SPECIAL ACTION** per premere o tirare e **premere i pulsanti X** (sinistra) o **A** (destra) per alternare tra premere e tirare.

Mescolare / Agitare liquidi

- Usa il mescolatore di vetro
- Contenitori con tappo shake
- Usa un agitatore magnetico con la piastra riscaldante

Nota: I provetti e le fiaschette Erlenmeyer richiedono tappi prima di essere scuotti.

Pipetta e contagocce

Per usarlo, usa il comando SPECIAL ACTION. Il liquido scorre a incrementi di 1 goccia - 0,05 mL (contagocce) o 1 mL (pipetta).

Burette

Per preparare la buretta: riempi la buretta a gas con acqua, poi blocca l'apertura eseguendo il **comando SPECIAL ACTION** e tieni pizzicato indice e pollice premuto. Puoi poi tenere la buretta capovolta e immergerla in un contenitore d'acqua. Una volta fissato con le pinze e nel contenitore pieno d'acqua, puoi aprire le dita e staccarlo.

Protezione del Laboratorio

L'uso e la rimozione avvengono afferrando i guanti (nitrile e protezione termica), gli occhiali protettivi e il camice da laboratorio, oppure il loro spazio vuoto (per la rimozione)